



UPOZORENJE: Mogući rizici tijekom upotrebe. Samo za osposobljene korisnike.



Za sigurnu i djelotvornu terapiju korisnik treba pročitati ove upute.



damir.rovis@rehafit.hr




098 274 116

1. Priprema kape i elektroda

- Ø 50-54 cm → S
- Ø 55-58 cm → M
- Ø 58-62 cm → L

Odaberite poziciju stimulacije

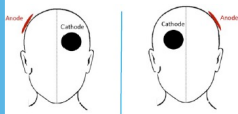

Katoda na strani boli, odnosno dominantnoj strani

Umetnite elektrode u kapu ispojitje kablove



2. Navlažite jastučice s 0.9% NaCl (fiziološka)

Položite jastučice



15 ml fiziološke



Jastučici se šire tako da popune cijeli prostor



3. Navucite kapu

Donji rub kape treba biti iznad obrva, a srednja crta na kapi treba biti okomito na nos.



4. Terapija

Uključite stimulator




Spojite kablove
Crveno na crveno
Crno na crno



Pritisnite za početak



Pokrenite terapiju kada je kontakt ispod 15 kΩ i oznaka OK

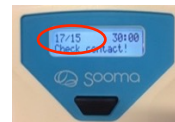

Pritiskom tipke u bilo koje vrijeme pauzirajte terapiju.

Po završetku terapije skinite kapu i isključite stimulator.



5. Čišćenje

Bacite korištene jastučice.



Isperite elektrode toplom vodom, obrišite mekom krpom i osušite.



Operite kapu mlakom vodom, obrišite mekom krpom i osušite.



Rješavanje problema

1. **Suhi/tvrđi dijelovi jastučića.** Dodatno namočite to mjesto s više fiziološke otopine i pritisnite prstom. U slučaju da ostaju i dalje suha i tvrda zamijenite jastučić novim.
2. **Jastučići ispadaju kada se kapa navlači na glavu.** Pažljivo navucite kapu tako da jastučići ne ispadnu. Provjerite jesu li jastučići na mjestu nakon što ste navukli kapu. Ako vas jastučić prelomi ili oštetni potrebno ga je zamijeniti novim.
3. **Poruka “Check contact!/provjeri kontakt”.** Lagano prisnite kapu na području obje elektrode tako da jastučići otpuste višak fiziološke otopine, ili ćete trebati skinuti kapu i dodati fiziološke otopine na jastučiće. Poruka će nestati kada je kvaliteta kontakta ispod 15. U slučaju da je kvaliteta kontakta 50+ provjerite jesu li kablovi dobro spojeni i moguća oštećenja na njima.
4. **Osjećaj da je stimulacija terapijom jaka.** Lagano prisnite kapu na području obje elektrode tako da jastučići otpuste višak fiziološke otopine, ili pauzirajte terapiju i skinite kapu te dodajte fiziološke otopine na jastučiće.

support@soomamedical.com
+358 10 328 9811

Sooma Ltd
Atomitie 5
00370 Helsinki, Finland

Kontraindikacije



Uređaji ili metalni predmet na ili
ili u lubanji.

Srčani pacemakers

Akutni ekcem ili ispucana koža
na području stimulacije.

Provjerite stanje kože i uređaja prije terapije

Koža na području stimulacije treba biti zdrava i čista. Skinite metalne predmete blizu elektroda prije početka terapije.

Uvijek koristite samo nove jastučiće. Zaostali elektrolit slabi kvalitetu električne struje. Ponovljena upotreba jastučića omogućuje stvaranje mikroorganizama.

Provjerite da je uređaj čist i ispravan. Zamijenite elektrode čija je površina oštećena ili iskrivljena. Zamijenite kablove koji su izlizani ili oštećeni. Uređaj se ne smije koristiti u slučaju vanjskog oštećenja ili neispravnog rada.

Kapa se može tijekom upotrebe i višekratnih pranja rastegnuti. Promijenite kapu nakon 90 dana upotrebe. Koristite samo Sooma komponente i pribor.

Čišćenje uređaja nakon terapije

1. Bacite korištene jastučiće.
2. Dezinficirajte uređaj, kablove i konektore.
3. Isperite elektrode s toplom tekućom vodom, obrišite i osušite s papirnatim ručnikom.
4. Isperite kapu s toplom tekućom vodom, obrišite i osušite s mekom krpom.
5. Elektrode i kapa trebaju se potpuno osušiti prije sljedeće terapije.

Napomena: Površno čišćenje može skratiti vijek trajanje uređaja.

Operite kapu prije primjene na drugom pacijentu.

- A. Ručno pranje ili
- B. Strojno pranje na 40°C.